

超音波多目的治療器


MULTIPIEZO

マルチピエゾ

VARIETY OF INSERTS

臨床を支える、多彩なチップ

スケーリングチップだけではなく、
きめ細かい治療をサポートする、
多彩なチップをご用意しています。

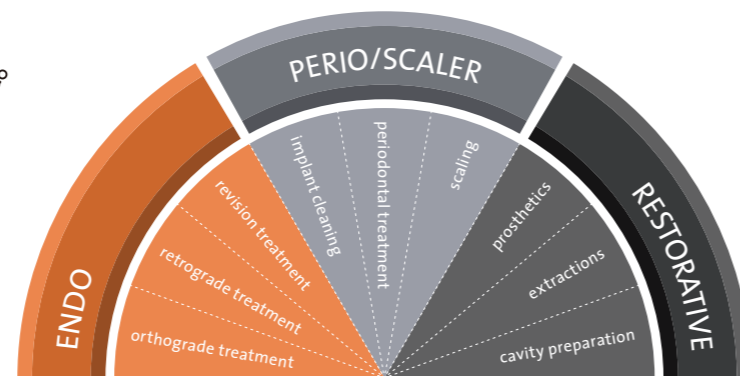

超音波多目的治療器

MULTIPIEZO

マルチピエゾ

920001

【包装内容】

ハンドピース (LED付) × 1本
インサートチップ S1 × 1本
インサートチップ S6 × 1本
インサートチップ P10 × 1本
チップスタンド
トルクレンチ K6 × 1個
フットスイッチ × 1個

【仕様】

電源 : 100-240V 50/60Hz
重量 : 2.4kg
サイズ : W230×L320×H145mm (本体)
周波数 : 24KHz~36KHz
モード : endo
 perio/scaler
 restorative


【特定保守管理医療機器】

販売名:マルチピエゾ
分類:管理医療機器
認証番号:226AGBZX00067000
一般名称:歯科用多目的超音波治療器
コード:70719000
製造元:Mectron S.p.A. (イタリア)

※カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造元

製造販売元

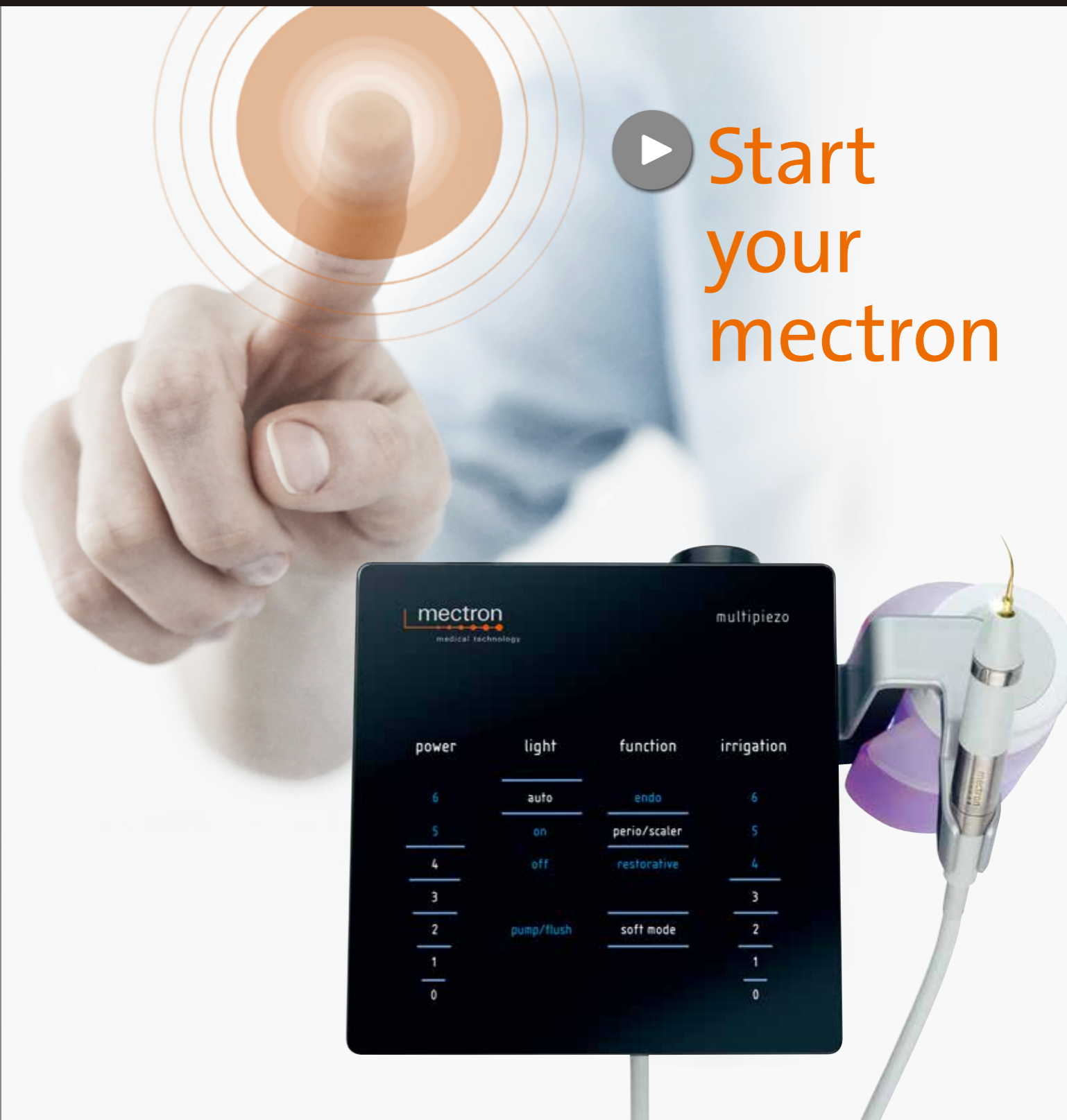

超音波多目的治療器

MULTIPIEZO Start your mectron


マルチピエゾ

機能性も、デザインも。
妥協をしないデンティストへ。

従来のピエゾ発振方式の機能に加え、抜歯や支台歯形成に有効なパルスモードやスケーリング、ペリオ治療において過敏な患者様に出力を下げることなく振動を弱めるソフトモードを備え、スケーリング、ペリオ、エンド、逆根管洗浄および形成、支台歯形成、抜歯など日常臨床の様々な場面で先生方の診療を低侵襲で効率的にサポートいたします。


パルスモード

restorative機能がパワーを6(最大)にすると、パルスモードが作動します。抜歯や補綴用チップの性能を最大限に発揮できるように超音波の波形を自動で変換します。

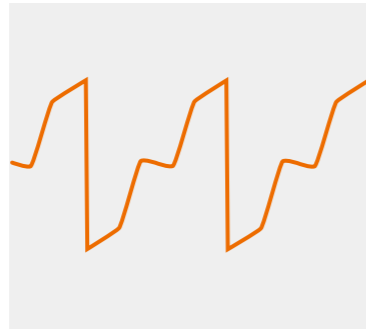


ソフトモード

過敏な患者さんや、炎症を起こしやすい患者さんへの歯周治療の際に使用します。振幅を小さくすることで、出力を下げることなく刺激の少ない治療が行えます。

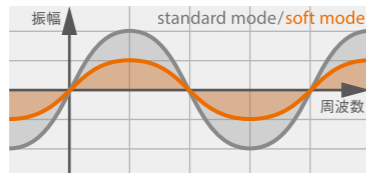

フィードバック機構

チップの周波数を常時チェックし、一定の出力で発振するようにコントロールします。硬い歯石に遭遇した際など、チップにかかった負荷の状態に応じて出力を上げ、終了後、元の状態に戻ります。

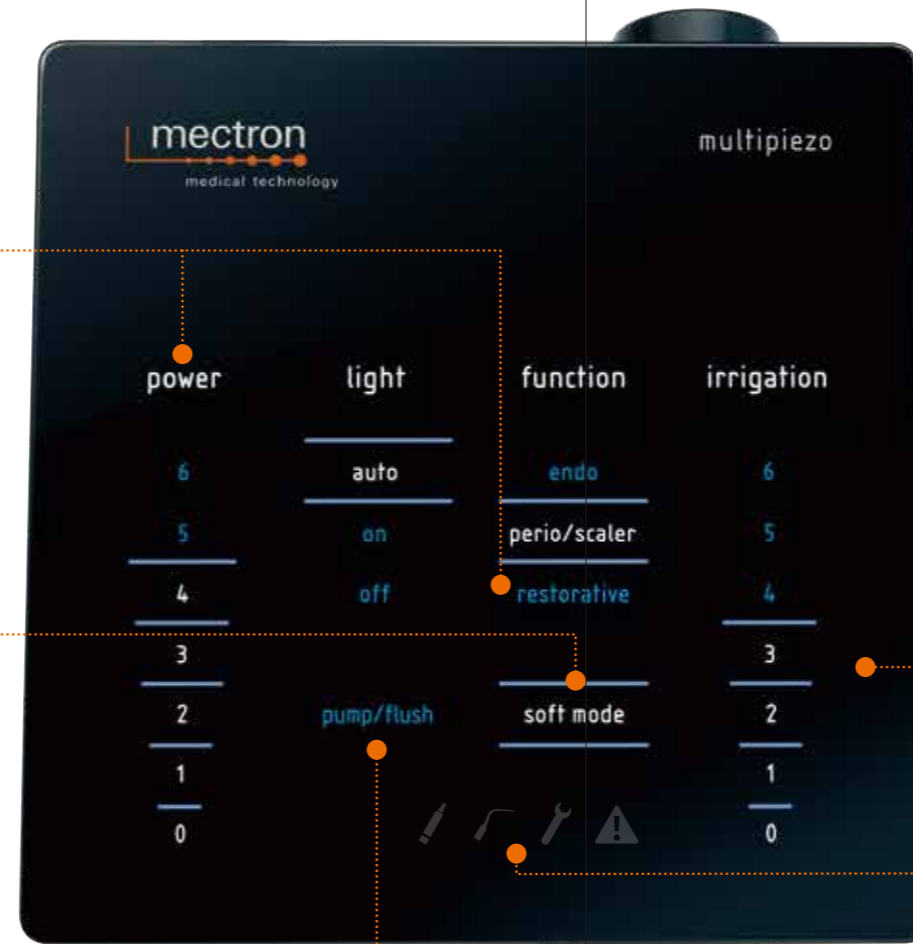

LED付きハンドピース

360度回転して位置を調整できるLED付きのハンドピースを標準でご用意しています。治療部位を明るく照らします。点灯もタッチパネルで簡単に選択できます。



付け替えが簡単なボトル

本体サイドに簡単に付け替えでき、温水や目的に合わせた薬液を選択できます。残量が分かりやすい設計です。



タッチパネルで簡単操作

パワー、流水量や機能がわかりやすく、タッチパネルで簡単に調節できます。

セルフチェック機能

異常を感知すると、自動で超音波振動と注水を0.1秒以内に停止します。また、停止原因をディスプレイにアイコンで表示します。



フラッシュ機能

薬液使用后、ボトルを水に代えて使用することで、注水回路を自動的に洗浄します。

EXTRACTIONS

歯根膜剥離用
ブレード

0.35mm




CROWN PREP

クラウン形成用
チップ

周囲の軟組織を傷付けずに歯肉縁下マージンの形成・仕上げができます。

ダイヤモンド
コーティング

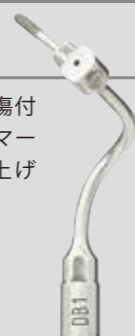

UNIVERSAL CART

【仕様】

サイズ: W5700×L5800×H9600mm
重量: 28kg



ユニバーサルカート

オプションのユニバーサルカートがあればストレスなくマルチピエゾを移動できます。カートの支柱にコードやホースなどが収納できるため、見た目はスッキリして、配線の絡みつきが起りません。天板はガラス製で清潔感があり、全体的に清掃が簡単にしやすくなっています。